



LATITUDE
FAUTEUIL DE MARCHE
BERÇANT PEDAL ROCKER

BRODA®

MOBILITÉ ET LIBERTÉ ACCRUES POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE PERTES COGNITIVES

De conception ergonomique, le fauteuil de marche berçant Latitude permet au patient de s'autopropulser avec ses mains ou ses pieds et de se bercer doucement, pour une mobilité et une indépendance accrues.



- 1 SIÈGE INCLINABLE À TOUTES LES POSITIONS
- 2 MODE BERÇANT ACTIONNÉ PAR LE PERSONNEL SOIGNANT
- 3 TENSION DE BERCEMENT AJUSTABLE
- 4 APPUIS-BRAS RÉGLABLES EN HAUTEUR
- 5 HAUTEUR DU SIÈGE AJUSTABLE
- 6 BUTÉES AMOVIBLES POUR UN SOUTIEN LATÉRAL SUPÉRIEUR

MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC ROUES MAG ET ROULETTES AVANT EN ALUMINIUM OFFERTES EN OPTION

AVANTAGES POUR LE PATIENT



Le mouvement berçant aide à calmer les moments d'agitation et absorbe les mouvements rigides pour créer un effet réconfortant.



L'inclinaison postérieure améliore la posture, redistribue la pression et contribue à prévenir les chutes (combinés, l'inclinaison du siège et le bercement permettent d'atteindre une inclinaison de 33°).



L'inclinaison du siège avec pivot avant favorise l'orientation visuelle et encourage la mobilité en assurant un positionnement adéquat des pieds sur le sol.



Les roues mag offertes en option facilitent la propulsion manuelle, ce qui permet aux patients de socialiser et d'interagir avec leur environnement.

AVANTAGES POUR LE PERSONNEL ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

- Positionnement assurant stabilité et soutien
- Aide à protéger l'intégrité de la peau
- L'inclinaison facilite les changements de position fréquents
- Conception axée sur la sécurité et la stabilité pour réduire le risque de blessure
- Favorise la stimulation et le contentement — idéal pour les patients souffrant de pertes cognitives

LATITUDE FAUTEUIL DE MARCHE BERÇANT

AVANTAGES DU SYSTÈME CONFORT TENSION SEATING®

- Position assise confortable à long terme
- Soutien conforme assurant la position adéquate du pelvis
- Aération améliorée réduisant l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Redistribution de la pression pour protéger l'intégrité de la peau
- S'adapte à diverses conditions comme la cyphose et la lordose

SPÉCIFICATIONS

Structure	Acier tubulaire de calibre 16
Siège et dossier	BRODA Comfort Tension Seating®
Degré d'inclinaison	18°, jusqu'à 33° avec le mode berçant
Largeur du siège (standard)	16", 18", 20" (40cm, 45cm, 50cm)
Larg. du siège (personnalisée)	22" (55cm)
Profondeur du siège (standard)	17", 18.5" (43cm, 46cm)
Prof. du siège (personnalisée)	15.5", 20" (39cm, 50cm)
Hauteur du siège	Ajustable de 14" à 19" (35 cm à 48 cm)
Roulettes avant	5", autobloquantes à toutes positions
Roulettes arrières	5", fixes
Roues mag optionnelles	20" ou 22" (avant ou arrière) (50 cm ou 55 cm)
Capacité de poids	250 lbs. (114 kg)
Rembourrage standard	Appui-tête, coussins pour épaules, coussins latéraux inférieurs, siège et dossier avec housses


ACCESSOIRES COURANTS

- Repose-pieds pivotants
- Repose-jambes pivotant et réglable en hauteur
- Plateau solide ou transparent
- Couvre-plateau coussiné
- Roulettes avant en aluminium
- Appuis-bras coussinés
- Support à oxygène
- Poteau pour soluté
- Demi-plateau
- Ceinture abducteur
- Recouvrement complet en vinyle du siège et du dossier
- Ensemble de positionnement Broda app




Les courroies Comfort Tension Seating® assurent un ajustement individuel et un confort supérieur.

OPTIONS DE REMBOURRAGE

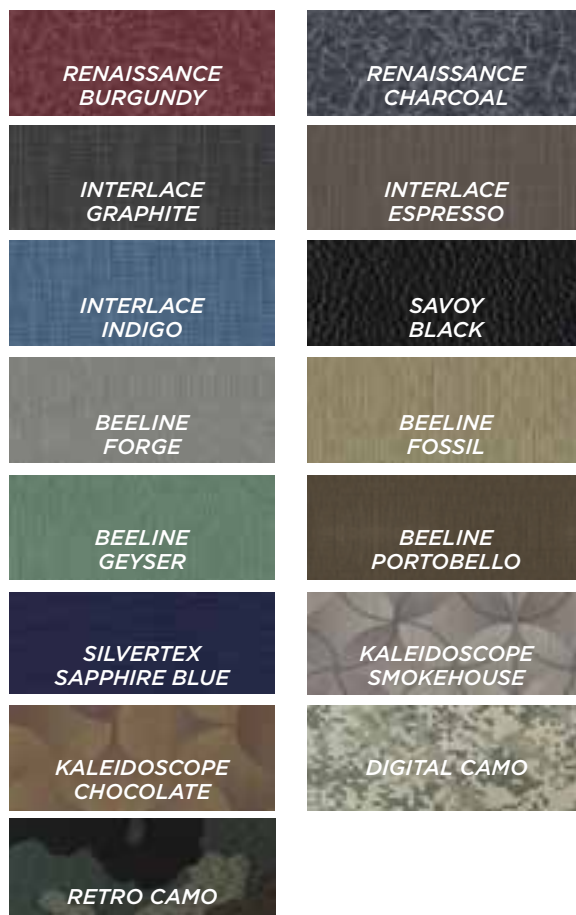

* en l'honneur de nos anciens combattants, les options de camouflage maintenant disponibles

OPTIONS POUR LA STRUCTURE

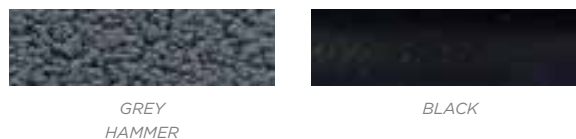



Durable Medical Equipment by



*info@brodaseating.com
p. 1-844-552-7632*

*Brodaseating.com
©Broda USA, INC.
6/18*